



介護ロボット製品紹介①

- * 移乗支援
- * 移動支援
- * 入浴支援
- * 認知症生活支援・認知症ケア支援



J-PAS fleairy (ジェイパス フレアリー) 製品仕様

製品仕様

機器本体外寸	W:222mm D:94mm H:289mm
本体重量	総重量約 1.6kg (装具除く) ※業界最軽量クラス
電源	リチウムイオン電池
連続稼働時間	約4h* *当社規定の動作環境での測定結果による
防塵防水性	IP55 (浴室作業可)



価格

1套セット価格	
本体セット (本体、バッテリー、ベスト、脚部ベルト、すねパッド) ※充電器別売りです	¥348,000 (税別¥382,800)
本製品は補助金対象です。(一部対象外地域あり) レンタルについてはご相談くださいませ。	
価格別表	
ベスト(S/M/L)	オープン価格
脚部ベルト(S/M/L)	
すねパッド(S/M/L)	
空調リュック	
バッテリー	¥14,000 (税別¥15,400)
充電器	¥7,500 (税別¥8,250)

※ベストは2色(ベージュ・ネイビー)から選べます ※各製品の送料別途

装具サイズバリエーション

		身長(cm)	胸囲(cm)
ベスト	S	145~160	65~105
	M	160~170	75~115
	L	170~185	85~125
脚部ベルト	S	145~160	
	M	160~170	
	L	170~185	
すねパッド	S	29~33	膝皿
	M	33~37	
	L	37~41	



センサー内蔵だから人の動きに調和する
電動タイプでも軽く、入浴介助で使える

介護・看護用
アシストスーツ

J-PAS fleairy

ジェイパス フレアリー

業界
最軽量
クラス



THE ROBOT AWARD
第10回ロボット大賞
優秀賞(ビジネス・社会実装部門)受賞



介護ロボット導入支援補助金など、各種補助金対象製品です。



無料体験のお申込、各種ご相談はコチラから

弊社へのご連絡

まずはWEBサイトから
お問い合わせくださいませ

URL <http://active-life.jp/jpasfleairy>



販売パートナー企業様

Human Harmonics 人と機械[モノ]の調和

JTEKT 株式会社ジェイテクト

www.jtekt.co.jp

〒448-8652 愛知県刈谷市朝日町1-1
BRアクティブ・ライフ推進部 Tel 0566-25-5193 Fax 050-3451-8158


■このリーフレットの内容は2025年1月現在のものです。
■このリーフレットの内容については、予告なく変更する場合があります。
■無断で複製・転載することを禁じます。
■製品のデザイン・仕様・価格などは予告なく変更する場合があります。
■Human Harmonics, J-PAS, J-PAS fleairyはジェイテクトの登録商標です。



CAT.NO. NA016JA-05E Printed in Japan '25.1

CAT.NO. NA016JA-05E

介護・看護に特化したアシストスーツで腰をまもる

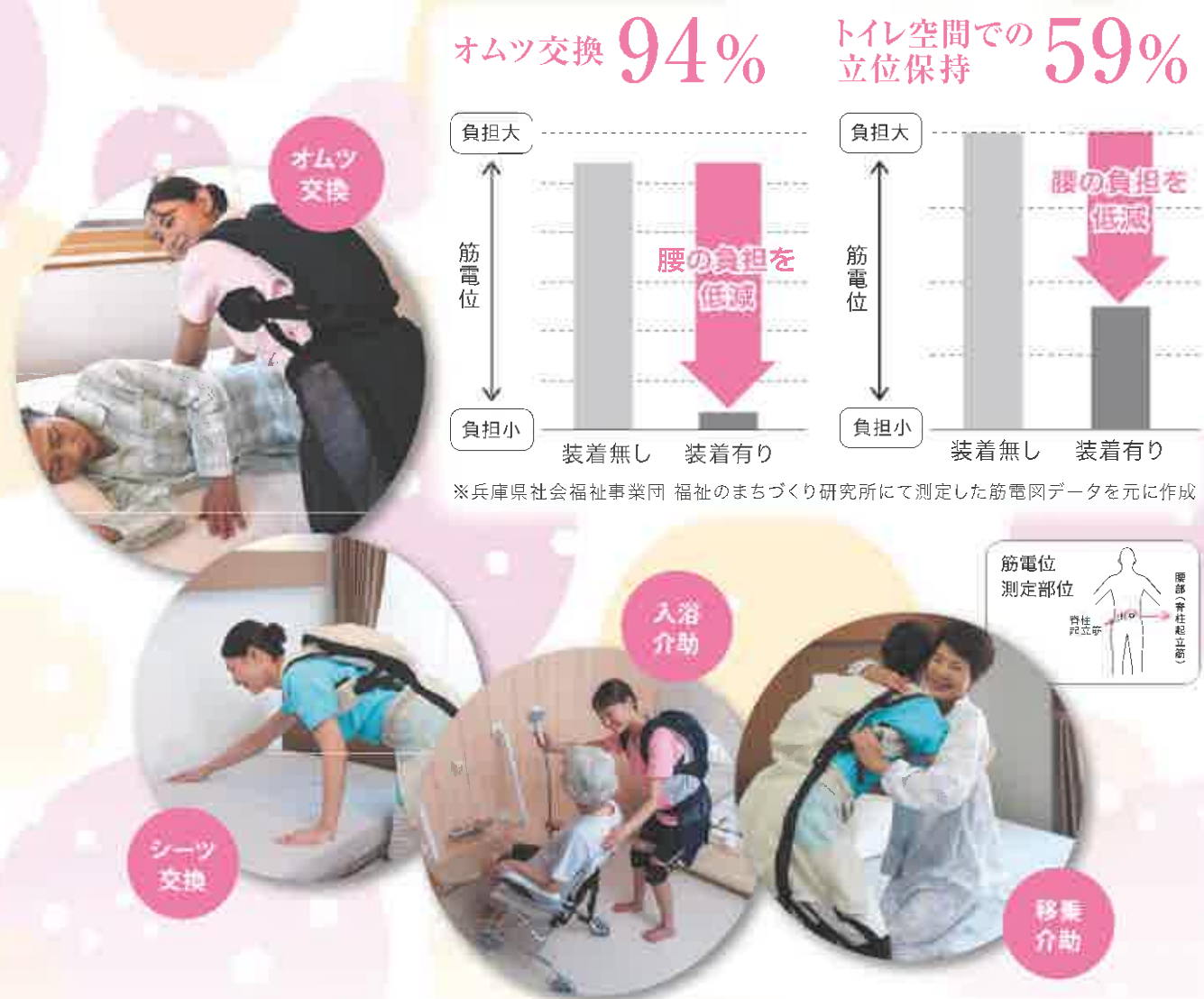

J-PAS fleairyを快適にご使用いただくために 作業に合わせて選択する3つのモード

センサー付きで動きに快適フィット!

装着者の体の動きをセンサーが検知し、モーター駆動によるベルト巻き上げで動作や姿勢をアシスト。連続する複合的な作業に対応し、しっかりとしたアシスト感を提供。

必要に応じて選べる3つのモード!



通常アシストモード

体位変換
オムツ交換
シーツ交換
移動介助

連続する小腰作業に向いています

ターボモード

移動介助
トイレ介助
車いす介助

一時的に大きな力が必要な際に向いています

フリー動作モード

事務作業など
アシストを必要としない日常の作業、居室間の移動や事務作業時に脱着の必要がなく、着用していないときと同じ動きが可能です



介護・看護に特化したアシストスーツ開発への想い



作業に特化することで快適を実現

J-PAS fleairy(ジェイパス フレアリー)は、介護・看護作業に特化して開発したアシストスーツです。私たちは「介護作業に“も”使える」という平均点を指すのではなく、介護・看護作業にとって使いやすさを目指しております。皆様のご協力を得て、実証試験を重ねて完成した製品です。より使いやすく、より快適に作業いただければ幸いです。

介護・看護向け
ならではの
ポイント



3step で20秒の簡単装着! フレームレスで動きやすい!!



肩ベルト

腰ベルト

すねパッド

装着方法や使い方、導入された施設様インタビューなど
YouTubeに掲載中です
(URL <http://onl.bz/YWRBV5a>)



MODEL

T1-02



THE ROBOT AWARD

第9回ロボット大賞

厚生労働大臣賞受賞

準備・操作が簡単

スリングシートが不要

どなたでも簡単操作

自然な立ち上がり

人が立ち上がる時の軌跡を表現

残った脚力を最大限に活用

もう抱えません！
腰負担ゼロへ

HUG

移乗サポートロボット ハグ

MODEL

L1-01



7th ELDERCARE
INNOVATION
AWARDS 2019

コンパクト

狭い場所でも使えるスリムなボディ

移動もらくらく

導入支援制度

各種補助金対象（施設）

介護保険レンタル対象（在宅）

Hug 使い方簡単 3 ステップ

step1

立つ



Hug に寄りかかった姿勢から、「立つ」ボタンで Hug がやさしく抱え上げます。
スリングシートなどは不要なため準備に時間がかかりません。

step2

動かす



Hug に乗った状態で動かすことができるため、ベッド、車いす、トイレ、シャワーチェアなどへ移乗することが可能です。

step3

座る



移乗先に着いたら、「座る」ボタンで安全に座ることができます。
立位を保持することもできるため、更衣介助、排泄ケアも簡単に行えます。

製品仕様

Hug T1-02 参考価格：1,080,000 円（非課税）

機種名／型式	Hug T1 ／ T1-02		バッテリー	種類	鉛蓄電池
寸法（全長 × 全幅 × 全高）	950×620×880 ～ 1350mm			電圧	DC24V
総重量	35kg			充電時間	8 時間
使用者最大体重	100kg			最大使用回数	約 100 回（満充電より）
動作条件	温度	0 ～ 40℃		貸与マーク取得済	
	湿度	20 ～ 90%RH	TAIS コード 01666-000003		

● 製品の仕様は予告無く変更することがあります。

Hug L1-01 参考価格：980,000 円（非課税）

機種名／型式	Hug L1 ／ L1-01		バッテリー	種類	鉛蓄電池
寸法（全長 × 全幅 × 全高）	880×550×850 ～ 1200mm			電圧	DC24V
総重量	30kg			充電時間	8 時間
使用者最大体重	100kg			最大使用回数	約 100 回（満充電より）
動作条件	温度	0 ～ 40℃	貸与マーク取得済		
	湿度	20 ～ 90%RH	TAIS コード 01666-000002		

● 製品の仕様は予告無く変更することがあります。

製品に関する情報とお問合せ

株式会社 FUJI

472-8686 愛知県知立市山町茶碓山 19
© 2024 FUJI CORPORATION All Rights Reserved



☎ 0566-55-8800

✉ hug@fuji.co.jp 🌐 <https://hug.fuji.co.jp>



Cat No.Hug/2024.Apr.



MORITOH

Y6セット Li-PINK Safety Robo

3年保証

耐荷重
120kg

床走行式リフトが
ロボット化!

吊り具掛け忘れ確認装置は、センサー、制御系、駆動系の要素を有する機械システムです。



「吊り具の安全を
確認してください」

吊り具の掛け忘れ確認装置
(音声ガイド)搭載
音量調整付き

音声のお知らせで
安全・安心に



吊り具の掛け忘れ、掛け間違いを未然に防止いただけます

吊り上げ時、約20kgの重さを感じるとリフトが一旦止まり、安全確認のための音声ガイドが流れます。確認後上昇ボタンを押すことで再度上昇を開始します。モーターを最大まで上げた際も、下降時に一旦リフトが止まり、音声ガイドが流れます。吊り具の掛け忘れ、掛け間違いを自動で修正するものではありません。体重約20kg以下の方でも、リフトはご使用いただけますが、音声ガイドは機能しません。

※1 すべての保証するものではありません。詳しくは製品保証書を正確に読んでください。

リチウムイオン電池搭載

- 軽い
- コンパクト
- 容量・性能アップ
2倍(当社比)



押し易くなった
緊急停止ボタン



■ リチウムイオン電池を
充電器にセットするだけ
本体充電ではありません

専用充電器で充電。充電ケーブルは付属しません。



■ 6輪キャスターで
軽々自在に小回り回転



■ 脚部は片手で軽く
2秒で開閉



■ 身体を引きずらず
自然な動きで吊上げます

リフト用デジタル体重計 MHS-2600 (検定付)



つるべに乗ったまま体重測定が可能。
体重測定が困難な方もリフト移送時に測定できます。
BMI (体格指数) 機能があり、栄養管理にも使用されています。

- 最小単位 / 100g
- 電源 / アルカリ単4乾電池6本
- 風乾除去機能付き


※ B-83 セット、Y4 Y6 セット、TEN にあわせてご利用ください。



Y6セット Li-PINK Safety Robo 製品仕様

Y6セット Li-PINK Safety Robo 外観寸法図

(単位:mm)

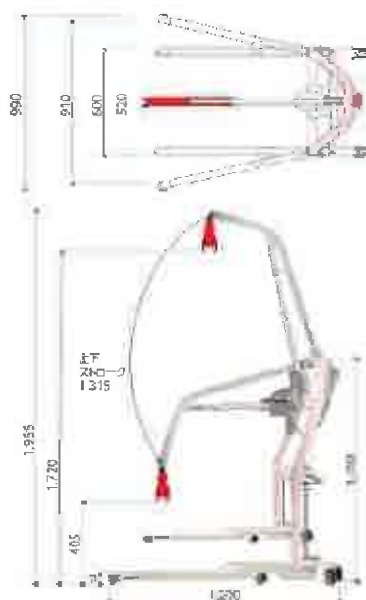

Y6セット Li-PINK Safety Robo 仕様

昇降速度 上昇	36.3mm/sec
昇降速度 下降	37.2mm/sec
耐荷重	120kg
上下ストローク	約1,315mm
吊上げ高さ (最高)	床より 1,720mm
(最低)	床より 405mm
体重計装着時 (最高)	床より 1,560mm
(最低)	床より 245mm
材質	スチール

搭載機能

緊急停止ボタン / エアージェンシースイッチ / クイックリリース / 揺れ込み防止 / バッテリー残量表示 / 音声誘導 on/off

リチウムイオン電池仕様

型 式	BAL50
出力電圧	25.2VDC
入力電圧	29.4V
防水性能	IPX6
重 量	0.9kg

つるべ Y6セット Li-PINK Safety Robo
つるべ・体重計付 Y6Wセット Li-PINK Safety Robo
リチウムイオン電池
リフト用体重計 (単品)



つるべ Y6セット Li-PINK

製 造
発売元



■ 本 社 / 〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36

お客様相談室
[24時間受付] **0120-65-2525**

ホームページ **モリトー** で検索!

E-mail info@moritoh.co.jp

■ 札幌営業所 ■ 埼玉営業所 ■ 中部営業所 ■ 岡山営業所
■ 仙台営業所 ■ 東京有明
ファールム ■ 大阪営業所 ■ 福岡営業所

■ 販売店




SKYLIFT*iR*

適合条件


■ご利用者様

身長 / 体重	145～180cm / 100kg未満
身体機能	・自力または一部介助でベッドで端座位が可能な方 ・立ち座りに必要な下肢関節の可動域が保たれている方 ・下肢のまひ（片まひ、両下肢まひ、四肢まひ）や拘縮があっても下肢に荷重をかけることが可能な方
留意事項	・重度の関節拘縮がある方や、全く力の入らない弛緩性まひの方は、適応しない場合があります。 ・起立性低血圧や重度の骨粗鬆症、変形性関節症のある方は主治医や看護師にご相談の上、ご使用ください。 ・ご使用に際して不安のある時は、事前に立位をとることに支障はないか主治医や担当のPT・OTにご確認ください。


■使用環境や福祉用具

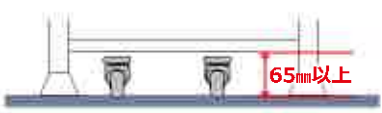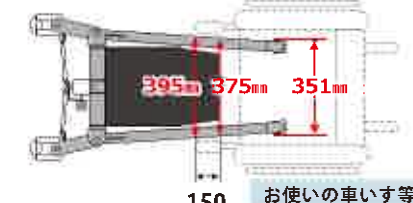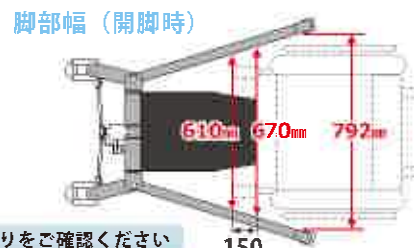脚部高	脚部幅
[ベッド等]  高さ 65 mm 以上 フレームのたわみ等に留意し、必ず利用者がベッドに座った状態で計測してください。	[車いす・洋式便器・シャワーキャリー・電動車いす等] 脚部幅（閉脚時）  脚部幅（開脚時）  お使いの車いす等の足回りをご確認ください

[SIDE]

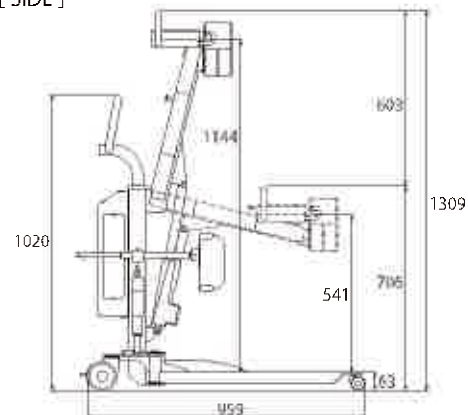

[TOP]

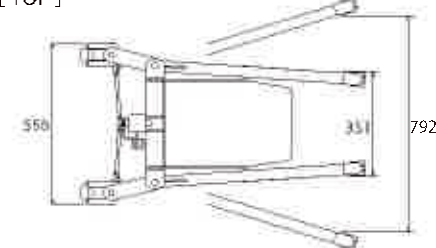

■スカイリフト iR

品 名	SL-2023
価 格	¥680,000 (非課税)
TAISコード	00149-000066
JANコード	4560232694539
サ イ ズ	幅 55.6 × 高さ 130.9 × 奥行 95.9 cm
重 量	43 kg
バッテリー	内蔵型 (家庭用 AC100V で充電)

■スカイリフト専用スリングシート

品 名	品 番	サ イ ズ	価 格 (税別)	TAISコード	JANコード
エアスリング	AS-201	M L	¥40,700	00149-000002	4560232694126 4560232694164
エアスリング専用 胸パット			¥2,750		4560232694188
エアスリング専用 脚ベルト	—	—	¥8,800	—	4560232694195
脚ベルト付 エアスリング	—	M L	¥49,500	00149-000054	4560232694201 4560232694225
サポートスリング	SS-202	M L	¥37,400	00149-000003	4560232694133 4560232694171
トイレットスリング	TS-204	—	¥37,400	00149-000052	4560232694157
スムーズホルダー	SH-203	—	¥21,450	00149-000025	4560232694140

【サイズ目安】 M：胴まわり 65～90 cm / L：胴まわり 85～110 cm

★スカリフト本体は非課税品
スリングシートは本体と同時に購入時、1枚のみ非課税扱いになります。

アイ・ソネックス株式会社

〒702-8004 岡山県岡山市中区江並100-7
TEL:086-200-1550 FAX:086-200-1553
<https://www.nasent.net> (ナース) 検索



・このカタログは印刷物のため、商品写真の色は現物と多少異なることがあります。また製品の仕様および価格、改善のため予告なく変更する場合があります。
・「QRコード」は、(株)デンソーウェーブの登録商標です。

2024.08

排泄ケア用

スタンディングリフト

SKYLIFT*iR*
スカイリフト iR SL-2023

介護保険：福祉用具貸与（移動用リフト）



狭い空間でもスイスイ！
コンパクトで小回り抜群

車いすと同程度のコンパクトさ。
車いすで移動ができるスペースがあれば、狭いトイレ内でも介助空間が確保できます。



軽い力で、スーッと移動！
ストレスフリーな走行性

床面の影響を受けにくい
双輪キャスターで、負担なく
軽い力で押し引き操作が
行えます。



大きく開いて、超低床！
どんな環境にもアクセスしやすい

・脚部が大きく開くので、電動車いすやシャワーキャリーにも
ストレスなくアクセスできます。
・後輪キャスターの高さを 63 mm まで低くし、低床ベッドにも
対応できます。



介護するひと、されるひと。トイレで笑顔のスッキリケア



iSONEX

排泄ケアはもちろん、
生活の様々なシーンで大活躍！



車いす

洋式便器

シャワーキャリー

立位訓練

3つのこだわり設計

①

真っ直ぐ立てる

完全な起立姿勢をとるために
胸パットとスリングシート、
膝パットが体幹や足腰を支え
ます。足底にしっかり体重が
乗ることで、毎日の移乗が
リハビリにつながります。



②

座奥まで キレイに座れる

車いすへ移乗するとき、座の
奥まで深く腰かけられるので
座り直しの手間が省け、滑り
すわりの防止に役立ちます。



③

足の載せ降ろしが スムーズ

少し足を浮かせるだけで足の
載せ降ろしが楽な低床設計。
「よいしょ！」と足を持ち上げる
ことなく、介助負担を大幅に
軽減します。



3つの安全性能

停止センサー

挟み込みを防止

停止センサーへの接触を
検知すると、自動で下降を
停止します。接触面が
広いので、大腿の太さや
位置に関わらず、確実に
挟み込みを防止します。



緊急下降ボタン

安全に下降できる

故障等でご利用者様が
乗った状態で下降できな
くなった際、安全に下降で
きます。停止センサー作動
時はボタンの照明が点滅
します。



自動電源オフ

バッテリーの 消耗を防ぐ

電源が入っていても20分間
作動がなければ、自動で
電源が切れます。電源の
切り忘れによるバッテリー
の消耗を防ぎます。




身体状況や用途に合わせて選択できる
豊富なスリングシート

状態像	立位	端座位	(車)いす座位	立位	端座位	(車)いす座位
目的	×			×		
移乗・移動	エアスリング AS-201 2つのフックにかけるだけ。 手早く装着できる スタンダードタイプ  Mサイズ／Lサイズ			サポートスリング SS-202 座位姿勢で移乗・移動ができて 初めての方も安心  		
排泄介助	エアスリング AS-201  			脚ベルト付エアスリング エアスリングだけでは ずり下がる方に  Mサイズ／Lサイズ		トイレットスリング TS-204 スリングを装着したままで ズボンやパンツがおろせる  
入浴介助	エアスリング AS-201					
リハビリ	エアスリング AS-201 			スムーズホルダー SH-203 しっかり腰をサポートして 起立姿勢を補助  必ずエアスリングや サポートスリングと 併用してください		サポートスリング SS-202 
オプション	エアスリング専用 胸パット スリングをより身体にフィットさせて、 立ち上がり時の滑りを防止。  			エアスリング専用 脚ベルト 状態の変化により立位姿勢が 困難になってきた方に。  		



仕様

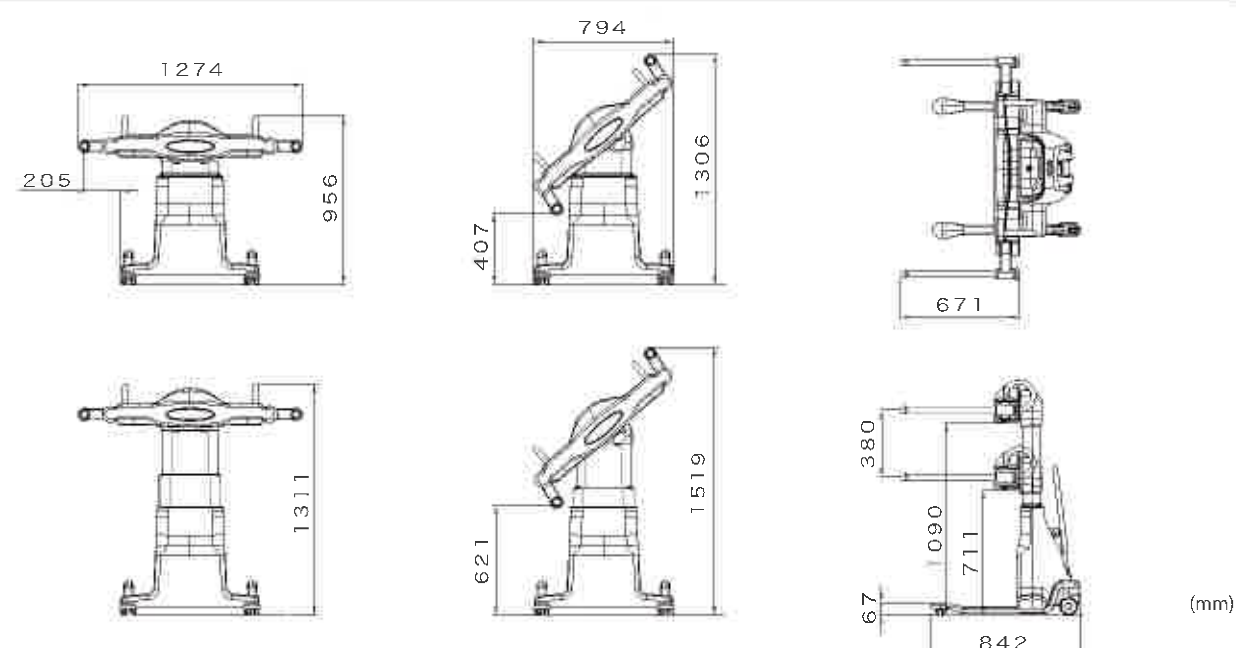

SASUKE 本体

品名	ロボット介護機器：移乗アシスト ROBOHELPER SASUKE
型式	RS1-12Y-B
総重量（標準バッテリー装着時）	70kg
適応荷重	120kg 以下
適応身長	180cm 以下（140cm 以上）
安全規格	ISO13482
使用環境温度	0 ～ 40℃
使用環境湿度	20 ～ 80%（結露なきこと）
耐用年数	5 年

専用バッテリー／専用充電器

専用バッテリー	型式	MBP-1
	種類	リチウムイオン電池
	容量	25.2V-5.7Ah
	重量	1.6kg
専用充電器	寿命	3 年（ご使用状況や保管条件などによる）
	形式	スタンド式（据置型）
	電源	AC100V 50/60Hz
	充電時間	約 2 ～ 4 時間

※製品仕様は改良などにより一部変更になる場合がございます。
※SASUKE は朝日インテック株式会社の登録商標です。

製造元：

マッスル株式会社 

〒541-0042 大阪市中央区今橋 2-5-8 トレードピア淀屋橋 6F
TEL 06-6229-9550 FAX 06-6229-9560
E-Mail healthcare@musclecorp.com
URL <http://www.musclecorp.com>

お問合せ



 マッスル株式会社



ROBOHELPER S A S U K E

ロボット介護機器：移 乗 ア シ ス ト



「お姫様抱っこ」のようにシートごとベッドから抱き上げます。
介護をうける方の体重を SASUKE が担います。



臥位～座位までの適した姿勢に操作ができるため、多様な車いすでご使用いただけます。
車いすに深く着座することができるため、着座後の姿勢調整の負担が軽減されます。



介護をうける方もおこなう方も やさしさと安心を

ロボヘルパー S A S U K E は、ベッド⇔車いす間の移乗をアシストします。

介護アシスト・ロボヘルパー・サスケは、「介護をうける方もおこなう方も、やさしさと安心を。」をコンセプトに世界で活躍するプロダクトデザイナー 喜多俊之氏のこだわりのデザイン。暮らし空間にマッチするデザインで、これからの介護を実現する世界の新製品です。



専用シート全面で身体を支えられるため、体圧が分散されやすく、移乗時の安定性を得やすくなります。身体上の空間での機器等の取付けがないため、視野をさえぎらず開放感があります。



対面で手の届く位置でベッド⇔車いす間を自由に移動できます。
お互いの顔を見ることができるため、介護をうける方もおこなう方も安心です。



充電式バッテリーを使用しています。コードレスであるため自由に動かすことができます。



アームが単体でスライドするため、専用シートへの挿入が簡単です。



動かしたい方向へ操作レバーを動かすとアームを自分の腕のように動かせる技術「ハプティックインターフェイス」を採用しています。



ぬくもりを感じさせる優しい光が、安心感を醸しだします。



アームは左右に回転し、最適な着座姿勢をとることができます。



アームは上下に昇降し、ベッドや車いすの高さに合わせることができます。



ベッドの下に脚を入れて使用します。低床ベッドにも対応します。ベッド下に70mm以上の空間が必要です。



キャスターはロック式です。ロックのオン・オフも簡単におこなえます。



安心ホルダー



専用シート

クッション

身体に触れる部分は縫い目のない一枚仕立てです。丈夫で柔らかい、通気性のある生地を使用しています。
安心ホルダーで肘部を優しく包み込み、転落や腕のはさみ込みを防ぎます。



標準型車いす、リクライニング型車いす等様々な車いすへの対応ができます。専用シートは、スタンダードMサイズ
の他、オプションでLサイズがあります。

● 介護をうける方のために・・・

- ・シート全面で身体を支えて体圧を分散。
- ・揺れの少ない安定した移乗。
- ・身体上での機器の取付けがなく視界を遮らない開放感。

● 介護をおこなう方のために・・・

- ・腰部への負担を軽減。
- ・操作や手順はとてもシンプル。
- ・臥位～座位までの適した姿勢に保持。
- ・幅広い種類の車いすに対応可能。
- ・着座後の姿勢調整が殆どなく負担が軽減。
- ・・・・人でも、軽い力で移乗介助が可能。

「移乗介助をより良いコミュニケーションの時間に」

- ・手元を見なくても操作可能。移乗介助に意識を向けられます。
- ・双方の心身の負担が軽減。より良いコミュニケーションが期待できます。



デザイン

喜多俊之 design by Toshiyuki Kita

1969 年よりイタリアと日本でデザインの制作活動を始める。家具、家電、ロボット、家庭日用品に至るまでのデザインで、多くのヒット製品を生む。作品の多くがニューヨーク近代美術館など世界のミュージアムにコレクションされている。また、クリエイティブ・プロデューサーとして多方面で活躍する。日本グッドデザイン賞審査委員長を務める(2004 年～2006 年)。大阪芸術大学教授。イタリア「黄金コンパス賞(国際功労賞)」など受賞多数。



新商品のご案内

らくらく

時間や労力のかかる
ケアや作業を
軽減

かるがる

女性でも大丈夫
体の負担を
軽減

かんたん

難しい作業を
誰でも悩まず
簡単に

移乗介助の負担を軽減！

プロフィットケア



電動昇降

フルリクライニングキャリー

FC-320



520,000円 (非課税)

こんなことに
困って
いませんか？

✓ ラクな姿勢で
移乗したいですね…



移乗介助する時は
腰をかがめなければならないから
腰がツライのが悩み…



✓ 高さの合わせられないものに
対しての移乗は大変ですね…



寝かせたいけど
診察台の方が少し高くて
移乗が大変…

✓ 狭いスペースでも
とりまわしが楽だと
いいですね…



狭い部屋で斜めに
車いすを入れてしまうと、
切り返しが大変…



プロフィットケア 電動昇降 フルリクライニング キャリア なら

電動で昇降するので、
持ち上げない介護が可能に。
また、横付け機能付きで、
狭いスペースでも
とりまわしが楽にできます。

ハビナス 電動昇降フルリクライニングキャリア
FC-320
520,000円（非課税）

特長 1 電動昇降で **らくらく** **かるがる** 移乗介助

座面高が 535mm～750mm(前座高)で無段階調整が可能。
ベストな高さで移乗介助ができます。




特長 2

横付け機能で

らくらく かんたん

車いす取りまわし

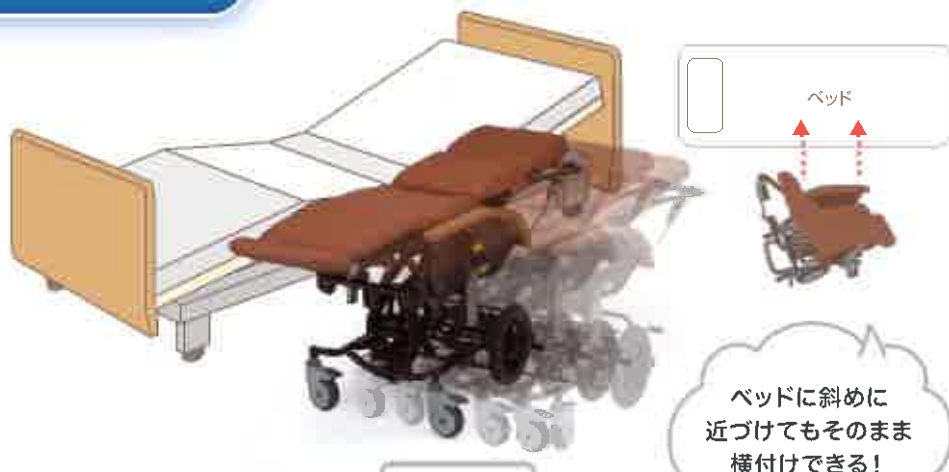

横付け
する

横付けペダル



完全に踏みこむ



車体後方の横付けペダルを踏むことにより、横付けキャスターが床に接地。後車輪が浮くことにより、ベッドへの横付けがラクにできます。

後車輪が接地



後車輪が浮き、横付けキャスターが接地
(後車輪にブレーキがかかる)



横付け
から
戻す



やさしさプレート



横付けペダルが足裏に当たる

戻す時は、やさしさプレートを踏むことにより、横付けペダルが戻る衝撃をおさえながら、後車輪を床に接地することができます。

横付けキャスター
が接地している



横付けキャスターが浮き、後車輪が接地
(後車輪のブレーキはかかったままです)



特長 3 高さメモリ機能で らくらく かんたん に高さ合わせ

事前に高さを登録し、「高さ合わせボタン」を押すと、登録した高さに昇降し自動で停止します。
位置合わせを考えなくても良いので、昇降中もご利用者をしっかり見守ることができます。



【その他の機能も充実！】



■単独エレベーター



■転倒防止車輪



■車載フック(前後2ヶ所)



■背面(左/コントロールボックス、右/バッテリー)
バッテリーの充電コードは背面に収納可能



■車輪キャスターロック

【フルリクライニングキャリー FC-120 の特長もそのまま搭載！】

※特長 4(一部)特長 6(一部)、オプションの画像は FC-120 です。

特長 4 居住性を高める 3つの構造



背面と座面はワイヤースプリングで
支える乗り心地の良さ



背中がズレない多支点リンクの
関節構造リクライニング



おしりがズレない膝ティルト

特長 5 1つのレバーで 3つの動き



背中がズレない多支点リンク



おしりがズレない膝ティルト



リクライニング

特長 6 女性にもやさしい かんたん 5つの操作



アームサポートは
上げれば自動ロック



ヘッド部は前後に
押すだけ

※視線改善や食事がしやすい姿勢になります



フットサポートの
高さ調整は工具いらず



リクライニングしても
持ちやすい水平ハンドル



リクライニングしても
横からかけられる
足踏み駐車ブレーキ

【オプション】

※価格はお問い合わせください。

背シートに上からはめこむだけで、小柄な方用の座奥行サイズになります。



専用ヘッドレスト



専用肘当てカバー



専用シートカバー



専用シートベルト



座奥行短縮シート



〈通常時(真横)〉

〈短縮シートセット時〉

【材 質】 本体フレーム/スチール(粉体塗装) シート(表地)/塩化ビニールレザー シート(中材)/ウレタンフォーム

TAIS 00220-000168

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	アームサポート高
直径 125mm	12 インチ	535~750mm	505~720mm	430mm	440mm	840mm	237mm
シート厚	リクライニング角度	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法	重量	耐荷重
50~60mm	98~166 度	604mm	1,210mm	1,160mm	705×604×1010mm	54.5kg	100kg

※電装品 電源 AC100V 50/60Hz、バッテリー:DC24V、充電時間:約6時間、連続使用時間 2分、電源コード 約3m

様々な状況のご利用者の座る姿勢をかんたんな操作で改善、
残存能力を活かせる商品シリーズ

プロフィットケア[®]ラインアップ

背中もおしりもズレない快適な乗り心地と
介助者の負担軽減を追求



フルリクライニングキャリア
FC-120
レザーシートタイプ
サイドスカート付
240,000円(非課税)

※シート3種類(レザーシート、布シート、丸洗いシート)
※サイドスカートあり、サイドスカートなし

座位保持能力の変化に合わせて
長期間使用できる、自走型車いす



座位保持自走型
ラクリオ[®]
PR-1000
100,000円(非課税)

座位保持自走型
ラクリオ[®]
介助ブレーキ付
PR-2000B
119,000円(非課税)

様々な姿勢に合わせて変形し、座位を保持する
ティルトリクライニング車いす



座位保持
ティルトリクライニング
ラクレスト[®] PR-2000
180,000円(非課税)


座位保持
ティルトリクライニング
ラクレスト[®] 介助ブレーキ付
PR-2000B
199,000円(非課税)

個別に高さを調整することによって、
ご自分で食事がとれるようになり、
ご利用者の自立支援と
介助者の負担軽減を叶える

個別昇降テーブル ここあ[®](4人用)



220,000円(本体価格 200,000円)

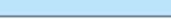ビジョンタヒラ コード	商 品 名	総額表示(円)	略 称 名								パッケージサイズ/重量 (高さ×正面幅×奥行)	ITF コード	JAN コード											
		本体価格(円)																						
		納入数	商品名(カナ)																					
202020DA	電動昇降 フルリクライニング キャリア FC-320	520,000 (非課税)	テ	ン	ト	ウ	F	C	3	2	790×690×1110mm /63.0kg	14902508256299												
		1	デ	ン	ト	ウ	シ	ヨ	ウ	コ				ハ	リ	ク	ラ	イ	ン	ギ	ャ	リ	ー	Ｆ

※以上の内容は変更する可能性があります。●印刷物と実物とでは多少色が異なる場合があります、あらかじめご了承ください。

ビジョン タヒラ 株式会社

〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町4番4号 ビジョンビル

●札幌営業所 (011)806-1161 ●仙台営業所 (022)208-8811 ●東京営業所 (03)3661-4312
●名古屋営業所 (052)231-9811 ●大阪営業所 (06)6354-5771 ●広島営業所 (082)543-5181
●福岡営業所 (092)716-3621

NEW!

ロボットアシストウォーカー

RT.3

アールティースリー

— ‘歩く’ をアシスト —



RT.WORKS

電動アシストだから 坂道でも安心・快適な歩行

電動アシストだから 坂道でも安心・快適な歩行

上り坂 アシストで楽々 自動的にパワーアシストが働き楽にのびれます	下り坂 適度に減速 自動的にブレーキが働きゆっくり歩けます	傾いた道 片流れ防止 ハンドルを取られることなく安定して進めます	坂道で手を離すと 自動的に停止 グリップ内のセンサーが手が離れたことを感知	速度を検知すると 自動で減速 自動的にブレーキがかかり転倒を防止します (制限速度の値は調整可能)
--	--	---	--	--

RT.3 SPECIAL POINT

● 手元でカンタン操作 日々使う機能のみ手元に集約しました。 バッテリー残量表示 消音ボタン 電源ボタン	● 足もととスッキリ ひろびろ歩きやすくなりました。(当社比)	● 累計歩行距離 がわかる これまでできなかった累計の歩行距離を確認したいときに確認できます。 *RT.2 では 1 回の歩行距離のみアナウンス 累計歩行距離は 〇〇km です。 今回の歩行は 〇〇m でした。
---	---	--

仕様

折りたたみ時 (cm) ・ハンドル高さ調節 7 段階 (74.5 - 77.8 - 81.0 - 84.3 - 87.5 - 90.8 - 94.0 cm) ・重量 約 10 kg	<table> <tr> <td>名 称</td> <td>RT.3 (アールティースリー)</td> </tr> <tr> <td>型 番</td> <td>RT3-01RD (レッド)</td> </tr> <tr> <td>電 源</td> <td>リチウムイオンバッテリー (専用充電器付属)</td> </tr> <tr> <td>動作時間</td> <td>連続動作 約 4 時間 (*上り/平坦/下りの標準歩行パターンにて歩行時)</td> </tr> <tr> <td>充電時間</td> <td>3 時間</td> </tr> <tr> <td>実用登坂性能</td> <td>縦断勾配 12% (傾斜 7 度) / 横断勾配 5% (傾斜 3 度)</td> </tr> <tr> <td>積載重量</td> <td>最大 5 Kg</td> </tr> <tr> <td>使用者体重</td> <td>最大 100Kg</td> </tr> <tr> <td>TAISコード</td> <td>01560-000005</td> </tr> <tr> <td>参考価格</td> <td>149,000 円 (税込 163,900 円)</td> </tr> </table>	名 称	RT.3 (アールティースリー)	型 番	RT3-01RD (レッド)	電 源	リチウムイオンバッテリー (専用充電器付属)	動作時間	連続動作 約 4 時間 (*上り/平坦/下りの標準歩行パターンにて歩行時)	充電時間	3 時間	実用登坂性能	縦断勾配 12% (傾斜 7 度) / 横断勾配 5% (傾斜 3 度)	積載重量	最大 5 Kg	使用者体重	最大 100Kg	TAISコード	01560-000005	参考価格	149,000 円 (税込 163,900 円)
名 称	RT.3 (アールティースリー)																				
型 番	RT3-01RD (レッド)																				
電 源	リチウムイオンバッテリー (専用充電器付属)																				
動作時間	連続動作 約 4 時間 (*上り/平坦/下りの標準歩行パターンにて歩行時)																				
充電時間	3 時間																				
実用登坂性能	縦断勾配 12% (傾斜 7 度) / 横断勾配 5% (傾斜 3 度)																				
積載重量	最大 5 Kg																				
使用者体重	最大 100Kg																				
TAISコード	01560-000005																				
参考価格	149,000 円 (税込 163,900 円)																				

RT.ワークス サポートセンター

0120-959-537

受付時間 (月~金) 9:00~17:00

*土日・祝および年末年始は除く

RT.ワークス株式会社 〒537-0025 大阪市東成区中道 1 丁目 10 番 26 号

<https://www.rtworks.co.jp/>



手を引くように、足を進める
トレーニングパートナー。

curara

“着る”ロボティックウェア
自分の足でもう一度歩きたい——
この想いに応える生活動作支援ロボットが
ロボティックウェアcurara®です。



かわさき基準 (KIS)
福祉機器として
認定されました。



導入事例



医療法人平成博愛会
印西総合病院



SHARE 脳梗塞後遺症リハビリセンター
ストロークジム札幌




アサヒサングリーン
脳神経リハビリセンター名古屋



社会医療法人至仁会
よしかわ通所リハビリテーション道



フィットネスクラブ
クライオフィット浦和

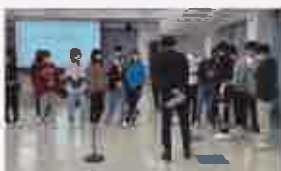

岩崎学園
横浜リハビリテーション専門学校



仙台大学



学校法人伊藤学園
優和福祉専門学校




東日本国際大学

curara® の6つの特徴

使い易さ

特徴① リズムに合わせて歩行学習

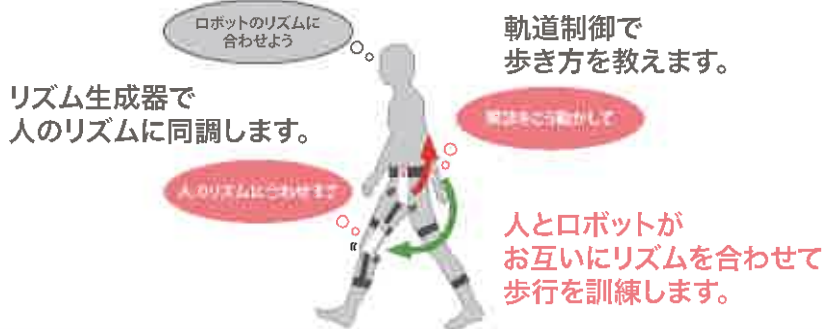

特徴② 圧倒的に軽い・扱いやすい



フルセット
2.9 kg
・コート2枚ほどの重さ

ハーフセット
1.9 kg
・コート1枚+αの重さ
(バッテリーを含む総重量)

足腰の弱い方でも装着して歩行訓練ができる重さになりました。



特徴③ 用途に合わせた構造変更機能

多様なニーズや症例に合わせて構造を変更できます。

4関節



2関節



片側2関節



片側1関節



特徴④ 解析/レポートなどのサポート

ご家族、スタッフ、ケアマネへの情報提供がスムーズになります。

- 歩行解析機能(歩行速度、歩幅、ケイデンス、対称性など)
- リアルタイム歩行状態表示および動作変更機能(関節角など)
- 制御パラメータ自動調整機能(ユーザの歩行状態を計測して、自動的に制御パラメータを設定)
- モニタリング資料自動作成機能



特徴⑤ 専用スマホで簡単操作

専用スマホを使って誰でも簡単にcurara®を操作できます。

【今後のアプリ更新計画】

- ・コーチング機能の充実
- ・起立着座、階段昇降訓練への対応
- ・その他



特徴⑥ 免荷装置との併用可能

重度の歩行障害の方には、免荷装置を併用することもできます。



免荷装置:
TG-800(モリ一製)



免荷装置:
popo(モリ一製)

curara® の仕様

フルセット
(股関節・膝関節用)

ハーフセット
(股関節用)



関節	フルセット	ハーフセット
モータ個数	4個	2個
重さ	2.9kg	1.9kg
連続稼働時間	約1時間	約2時間
駆動トルク	6Nm(最大)	6Nm(最大)
適応身長	145-175cm	145-175cm
適応ウエスト	60-90cm	60-90cm
使用環境	屋内	屋内
構造	非外骨格構造	非外骨格構造
制御方式	同調制御	同調制御
端末	専用スマホ	専用スマホ

価格

	フルセット	ハーフセット
希望小売価格	1,590,000円 税別74,000円	1,120,000円 税別52,000円
レンタル価格月額	80,000円 (税込88,000円)	56,000円 (税込61,600円)

サポート

- ・ご購入の場合、一年間の保証が付きます。
 - ・レンタルでのご利用につきましては、適切な使用によるロボットの故障は無償で対応を行います。
 - ・6か月ごとの定期点検を行います。
 - ・操作方法などへの質問に対し回答いたします。
- 詳しくはHPをご確認ください。

Q&A

- Q1: 上肢のアシストはありますか?
A1: 現在は下肢の歩行対応のみとなっております。
- Q2: 適用サイズはどの程度の範囲ですか?
A2: 身長145cm~175cm ウエスト60cm~90cmです。
- Q3: 子供でも使えますか?
A3: 適用サイズ内でしたら可能です。
- Q4: 重さはどのくらいですか?
A4: フルセット(4軸)2.9kg、ハーフセット(2軸)1.9kgです。
- Q5: 走れますか?
A5: curara®は歩行トレーニングのためのロボットですので、走ることは出来ません。
- Q6: 後ろ歩きは出来ますか?
A6: できません。
- Q7: 屋外で使用できますか?
A7: 基本的には屋内仕様ですが、お天気が良く風がない日中でしたら、短時間の使用は可能です。

申込・利用の流れ



※詳しくはHPをご覧ください。

AssistMotion株式会社

本社: 〒386-0017 長野県上田市路入2丁目16-24
信州大学オープンベンチャー・イノベーションセンター 206号室
TEL: 0268-75-8124 FAX: 0268-75-8124
南相馬オフィス: 〒975-0036 福島県南相馬市原町区堂浜学園掛45-245
南相馬市産業創造センターB-8
TEL: 0244-26-7831

E-mail: info@assistmotion.jp

URL: <http://assistmotion.jp>



HUG

移乗サポートロボット ハグ

MODEL
L1-01WP

防水タイプ

NEW

入浴介助の 救世主



脱衣・入浴時の
立位保持



臀部シャワー



シャワーチェアへの
移乗介助

Hug 使い方簡単 3 ステップ

step1

立つ



Hug に寄りかかった姿勢から、「立つ」ボタンで Hug がやさしく抱え上げます。
スリングシートなどは不要なため準備に時間がかかりません。

step2

動かす



Hug に乗った状態で動かすことができるため、ベッド、車いす、トイレ、シャワーチェアなどへ移乗することが可能です。

step3

座る




移乗先に着いたら、「座る」ボタンで安全に座ることができます。
立位を保持することもできるため、更衣介助、排泄ケアも簡単に行えます。

参考価格：1,680,000 円（非課税）

機種名／型式	Hug L1WP ／ L1-01WP		バッテリー	種類	リチウムイオン電池
寸法（全長 × 全幅 × 全高）	880×550×890 ～ 1200mm			電圧	DC25.7V
総重量	32kg			充電時間	4 時間
使用者最大体重	100kg			最大使用回数	約 100 回（満充電より）
動作条件	温度	0 ～ 40℃	主要材質		ステンレス／ABS
IP 等級	IPX6		TAIS コード 01666-000008		

● 製品の仕様は予告無く変更することがあります。

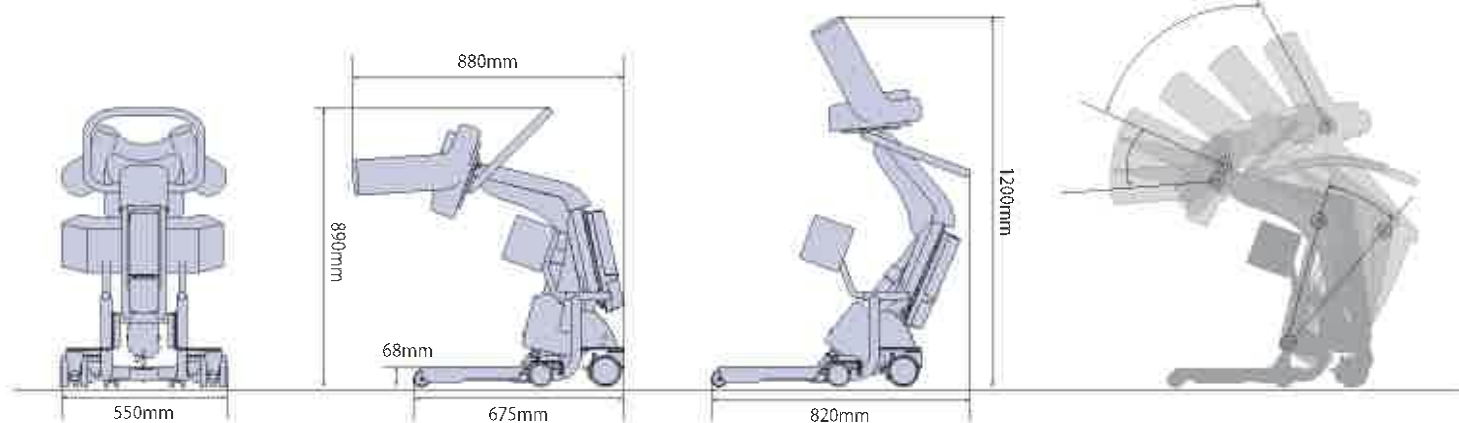

製品に関する情報とお問合せ

株式会社 FUJI

472-8686 愛知県知立市山町茶碓山 19
© 2024 FUJI CORPORATION All Rights Reserved



☎ 0566-55-8800

✉ hug@fuji.co.jp 🌐 <https://hug.fuji.co.jp>



Cat.No.Hug WP/2024.Apr.

メンタルコミットロボット

株式会社 知能システム

パロ

MCR-900JP

「メンタルコミットロボット」は、人と共存するロボットで、かわいいや心地良いなど人からの主観的な評価を重視し、人との相互作用によって、人に楽しみや安らぎなどの精神的な働きかけを行うことを目的にしたロボットです。パロは、タテゴトアザラシの赤ちゃんをモデルにしています。



金

白

<http://paro.jp>

アザラシ型ロボット「パロ」は
2002年2月26日
「Most Therapeutic Robot :
世界一の癒しロボット」
としてギネスブックに
認定されました。

体をなでると…

パロの体をなでてあげると、声を出して喜んだり、気持ちよさそうにします。いろいろなところをなでてあげてください。

パロのえさ

パロは電気をえさとして動きます。お腹に入っているバッテリーに電気を蓄えて（充電して）あげないと、パロは動けなくなってしまいます。寝ばないときは、電源をOFFにしてください。電源スイッチは、パロの後足根元にあります。

ふれあいをいつまでも

動物は飼い主に似るといわれますよね？パロだってそうなのです。飼い主とのふれあいを学習します。いつもたたかっていたら、怒りっぽい性格になり、やさしくなで続けてあげれば、喜びやすい性格になっていきます。やさしくふれあい続けてあげてください。

名前をつけてあげよう

パロは頻繁に呼ばれる声を自分の名前として学習します。一番話しかけてくれるあなたの声に反応してくれるのです。思わずささやきたくくなる様な素敵な名前をつけてあげてください。



バッテリーが空でも動かします

バッテリーが未充電になっている時でも、ACアダプタを使用して、いつでも動かす事ができます。

強い光に顔をあてると…

フラッシュなどの強い光をあてると、まばたきをしていやがります。

おなかが空くと…（バッテリーの残量表示）

バッテリーの残量が極端に少なくなると、おなかが空いた声を2回発声し、えさ（充電）をおねだりします。バッテリー残量が完全になくなると、電源OFFとなります。

抱きあげてみましょう

抱かれたり、あお向けにされたことを理解します。乱暴に抱き上げるとご機嫌をそこねてしまいます。

ロボット・セラピー（Robot Therapy）

パロは、本物の動物を飼うことが困難な場所や人々のために、セラピーを目的に1993年から開発・販売されました。デイサービスセンター、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、小児病院、児童養護施設などで、数多く、長期間に渡る実験を続けることにより、アニマル・セラピーと同じ効果を得られることを確認しました。ロボット・セラピーの実験を通して、衛生性、安全性、信頼性、耐久性、メンテナンスの容易性などの観点から、パロの価値を認め、第9世代が完成しました。

主 な 仕 様

パロ本体

CPU	32bit RISCプロセッサ
可動部	目(まぶた) 頭 前足 後足
ぬいぐるみ	制菌加工(色)白・金・チャコールグレー・さくら色
音声入力	マイクロホン(3ヶ所)・日本語対応
音声出力	スピーカ
内蔵センサ	触覚センサ (頭、あご、背中(上、横)、前足、後足) ひげセンサ 光センサ 姿勢センサ 温度センサ(体温制御)
消費電力	約9W
動作時間	約5~8時間(満充電時のバッテリー駆動時間)
外形寸法	約350×160×570mm (幅×高さ×奥行き)
重量	約2.55kg(バッテリー装着時)
動作温度	5℃~35℃
動作湿度	40%~85%
保存温度	-20℃~60℃
保存湿度	10%~90%(ただし結露、氷結のないこと)

本商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
本商品は(独)産業技術総合研究所からライセンス承認済。

ACアダプタ

入力	AC100V-240V 50-60Hz、25W 35VA~70VA
出力	DC18V、1.1A
動作温度	0℃~35℃
動作湿度	20%~90%
保存温度	-20℃~75℃
保存湿度	20%~90%(結露、氷結のないこと)
最大外形寸法	約60×35×160mm(コード含まない) (幅×高さ×奥行き)
重量	約0.7kg
接続コードの長さ	DCコード約2.0m 電源コード約2.0m

ACアダプターは日本国内専用です。

リチウムイオンバッテリーパック

使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	7.4V DC
容量	2600mAh
動作温度	0℃~40℃
湿度	65%±20%
保存温度	-20℃~+20℃(1年以内)
湿度	65%±20%(1年以内)
外形寸法	約40×23×70mm (幅×高さ×奥行き)
重量	約120g



安全に関する注意

商品を安全にお使いいただくために、御使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。



株式会社 知能システム

〒939-1865

富山県南砺市城端 4316-1 南砺市起業家支援センター JEC3階

URL: <http://intelligent-system.jp/>

パロ インフォメーションセンター

フリーダイヤル ☎ 0120-86-1842

携帯電話・PHSでのご利用は 0763-62-8686

FAX 0763-62-8600

E-mail でのお問い合わせ info@paro.jp

受付時間: 午前10:00~午後5:00まで

(土日祝祭日・年末年始を除く)

本体セット

主な付属品 ACアダプター、DC電源コード、バッテリーパック

1年保証 *保証は日本国内に限らせて頂きます。

価格 423,500円 (税抜価格 385,000円)

福祉・医療機関向けのメンテナンスパック付もご用意しております。

価格 495,000円 (税抜価格 450,000円)

[メンテナンスパック] 3年保証とメンテナンス

*メンテナンス パロを飼いはじめてから1年後と2年後を目処にパロ診断(動作確認、内部検査)、バッテリー交換、毛皮のクリーニングを無償で行います。(バッテリー交換は1回)